

Marca: JPINGLOBAL

Modelo: 2019

Referencia: JP40LH

Tipo: Esterilizador a vapor digital –automático

Descripción: Autoclave digital automática (Cámara redonda) con sistema de control automático y control electrónico.


1. Condiciones ambientales

La atmósfera ambiente donde se encuentre la autoclave no debe exceder los 40 °C (104 °F), ni un 80% de humedad relativa.

No deben existir gases y vapores peligrosos en la atmosfera donde se encuentre la autoclave.

2. Montaje

Coloque la autoclave en una superficie nivelada, dejando un espacio adecuado a su alrededor para la operación y servicio. El peso aproximado del equipo es de 60 kilogramos.

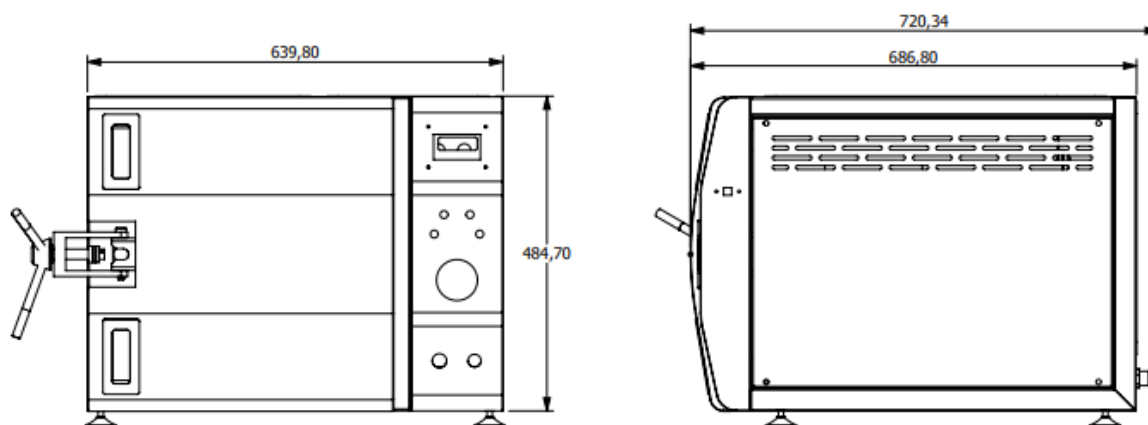

*Esta imagen es de modo ilustrativo, puede cambiar su forma sin previo aviso

3. Utilidades

Conecte la autoclave a los suministros de la siguiente manera:

3.1.1. Agua

La autoclave se debe utilizar con agua de las siguientes características:

1. Agua destilada o libre de minerales.

- Dureza <0.1 mmol/l
- Conductividad <50uS/cm

Tabla 1: Características Físicas y niveles máximos aceptables de contaminantes en el agua*

Residuo por evaporación	≤15 mg/l
Sílice	≤2 mg/l
Hierro	≤0.2 mg/l
Cadmio	≤0.005 mg/l
Plomo	≤0.05 mg/l
Otros Metales Pesados	≤0.1 mg/l

Cloruro	≤3 mg/l
Fosfato	≤0.5 mg/l
Conductividad	≤50 us/cm
pH	6.5 a 8
Apariencia	Incoloro, Limpio sin sedimento
Dureza	< 0.1 mmol/l

4. Desagüe

Conecte las siguientes salidas directamente al embudo de drenaje o conéctelos a través de un tubo colector de drenaje. El sistema de drenaje debe soportar temperaturas entre los 80°C – 100°C.

5. Requerimientos Eléctricos

El suministro eléctrico debe estar acorde a la información suministrada en la Tabla 2.

Tabla 2: Requerimientos Eléctricos

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Electricidad	220 VAC, 60 Hz, Bifásico (Dos Fases), 2.2kW (no exceder fluctuaciones $\pm 10\%$)	220VAC: 2 Fases+ Tierra. NEMA L6-20P