

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDAD 120 LITROS – AUTOMÁTICA REF. JP120LH

FJP – 63 Version 01

Pág. 1 de 2.

JP BIOINGENIERÍA S.A.S. NIT. 900409216-6

Marca: JPINGLOBAL	
Modelo: 2019	
Referencia: JP120LH	

Tipo: Esterilizador a vapor digital -automático

Descripción: Autoclave automática de gran capacidad – Cámara rectangular tipo horizontal. Capacidad 120 Litros con sistema integrado de vapor y pantalla touch a todo color.


1. Condiciones ambientales


La atmósfera ambiente donde se encuentre la autoclave no debe exceder los 40 °C (104 °F), ni un 80% de humedad relativa.

No deben existir gases y vapores peligrosos en la atmosfera donde se encuentre la autoclave.

2. Montaje

Coloque la autoclave en una superficie nivelada, dejando un espacio adecuado a su alrededor para la operación y servicio.

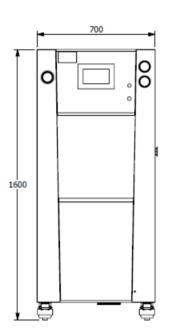

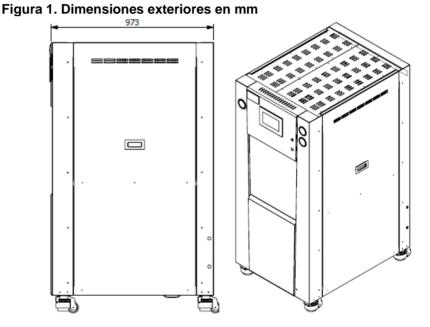

3. Utilidades

Conecte la autoclave a los suministros de la siguiente manera:

3.1.1. Agua

La autoclave debe contar con dos sistemas de suministro agua:

- 1. Agua para la bomba de vacío y enfriamiento del intercambiador de calor;
 - La dureza no debe superar 0.7-2 mmol / l.
 - La presión debe estar en el rango de 2-5 bar (30-70 psi)
 - Conexión a la red por manguera de ½ "
- 2. Agua destilada o libre de minerales para el generador de vapor.
 - Conecte el depósito de agua destilada o libre de minerales a una fuente de suministro de agua destilada o libre de minerales mediante un tubo de ½ "
 - La presión debe estar en el rango de 2-5 bar (30-70 psi)



REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDAD 120 LITROS – AUTOMÁTICA REF. JP120LH

FJP – 63
Version 01
Pág. 2 de 2.

- Dureza <0.1 mmol/l
- Conductividad <50uS/cm
- Conexión a la red por manguera de ½"

Tabla 1: Características Físicas y niveles máximos aceptables de contaminantes en el agua*

Residuo por evaporación	≤15 mg/l	
Sílice	≤2 mg/l	
Hierro	≤0.2 mg/l	
Cadmio	≤0.005 mg/l	
Plomo	≤0.05 mg/l	
Otros Metales Pesados	≤0.1 mg/l	
Cloruro	≤3 mg/l	
Fosfato	≤0.5 mg/l	
Conductividad	≤50 us/cm	
рН	6.5 a 8	
Apariencia	Incoloro, Limpio sin sedimento	
Dureza	< 0.1 mmol/l	

4. Desagüe

Conecte las siguientes salidas directamente al embudo de drenaje o conéctelos a través de un tubo colector de drenaje. El sistema de drenaje debe soportar temperaturas entre los $80^{\circ}\text{C} - 120^{\circ}\text{C}$.

5. Requerimientos Eléctricos

El suministro eléctrico debe estar acorde a la información suministrada en la Tabla 2.

Tabla 2: Requerimientos Eléctricos

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Electricidad	220 VAC, 60 Hz, Trifásico	220VAC: 3
	(Tres Fases), 11kW (no	Fases+ Tierra.
	exceder fluctuaciones +10%)	
	115VAC, 60 Hz, Monofásico,	115VAC: 1 Fase
	900W (no exceder	+ Neutro +
	fluctuaciones <u>+</u> 10%)	Tierra.