

Marca: JPINGLOBAL

Modelo: 2021

Referencia: JPA160LH

Tipo: Esterilizador a vapor digital –automático

Descripción: Autoclave digital automática de gran capacidad (Cámara redonda) con sistema integrado de vapor y control electrónico.

1. Condiciones ambientales

La atmósfera ambiente donde se encuentre la autoclave no debe exceder los 40 °C (104 °F), ni un 80% de humedad relativa.

No deben existir gases y vapores peligrosos en la atmosfera donde se encuentre la autoclave.

2. Montaje

Coloque la autoclave en una superficie nivelada, dejando un espacio adecuado a su alrededor para la operación y servicio.

Dimensiones en mm (con mesa)

Alto: 1468 mm

Ancho: 898 mm




Fondo: 1303 mm

Dimensiones en mm(sin mesa)

Alto: 767 mm

Ancho: 855 mm

Fondo: 1228 mm

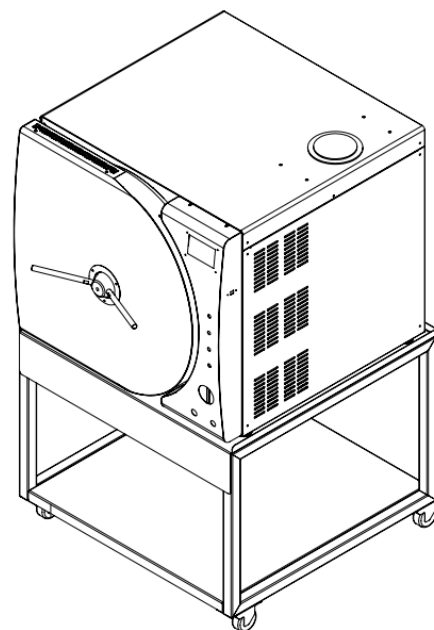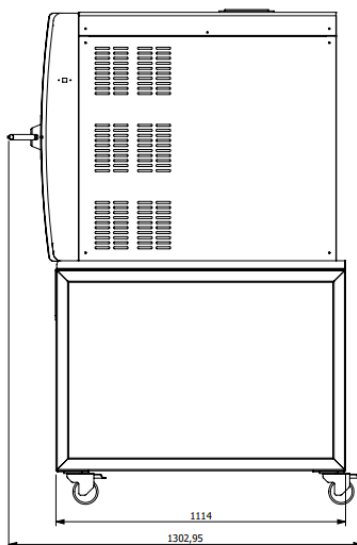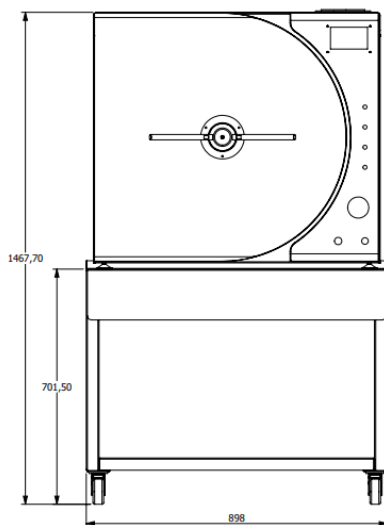

AUTOCLAVE HORIZONTAL 160 LITROS
JPINGLOBAL ACH-160L-2021

3. Agua

El agua que se aplique a la autoclave debe cumplir con las siguientes características:

Tabla 1: Características Físicas y niveles máximos aceptables de contaminantes en el agua*

Residuo por evaporación	≤15 mg/l
Sílice	≤2 mg/l
Hierro	≤0.2 mg/l

Cadmio	≤0.005 mg/l
Plomo	≤0.05 mg/l
Otros Metales Pesados	≤0.1 mg/l
Cloruro	≤3 mg/l
Fosfato	≤0.5 mg/l
Conductividad	≤50 us/cm, >10 us/cm
pH	6.5 a 8
Apariencia	Incoloro, Limpio sin sedimento
Dureza	< 0.1 mmol/l

4. Desagüe

El equipo cuenta con una válvula de Bola de 3/8" NPT hembra, en la parte frontal del mismo para el drenaje del reservorio.

5. Requerimientos Eléctricos

El suministro eléctrico debe estar acorde a la información suministrada en la Tabla 2.

Tabla 2: Requerimientos Eléctricos

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Electricidad	220 VAC, 60 Hz, Trifásico (Tres Fases), 12kW (no exceder fluctuaciones <u>+10%</u>)	220VAC: 3 Fases+ Tierra.