

Marca: JPINGLOBAL

Modelo: 2021

Referencia: JPA23LH

Tipo: Esterilizador a vapor digital –automático

**Descripción:** Autoclave digital automática horizontal de sobremesa (Cámara sencilla) para laboratorio.

### 1. Condiciones ambientales

La atmósfera ambiente donde se encuentre la autoclave no debe exceder los 40 °C (104 °F), ni un 80% de humedad relativa.

No deben existir gases y vapores peligrosos en la atmosfera donde se encuentre la autoclave.


### 2. Montaje

Las dimensiones externas de la autoclave son las siguientes:

Ancho: 589 mm

Altura: 457 mm

Fondo: 732 mm

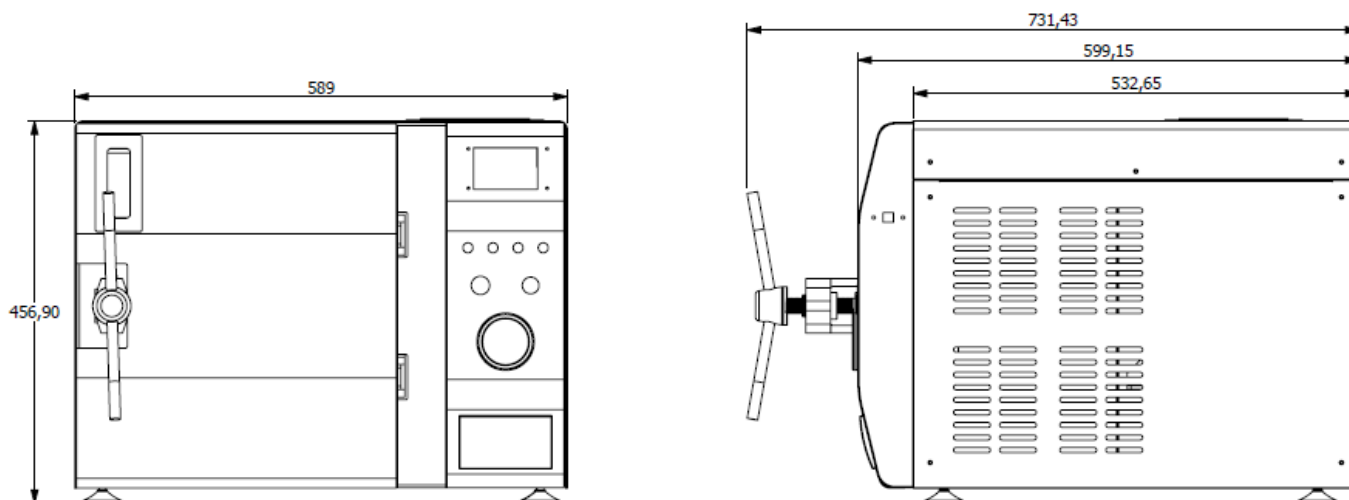

### 3. Agua

El agua que se aplique a la autoclave debe cumplir con las siguientes características:

**Tabla 1: Características Físicas y niveles máximos aceptables de contaminantes en el agua\***

Residuo por evaporación	≤15 mg/l
Sílice	≤2 mg/l
Hierro	≤0.2 mg/l
Cadmio	≤0.005 mg/l
Plomo	≤0.05 mg/l
Otros Metales Pesados	≤0.1 mg/l
Cloruro	≤3 mg/l

Fosfato	≤0.5 mg/l
Conductividad	≤50 us/cm, >10us/cm
pH	6.5 a 8
Apariencia	Incoloro, Limpio sin sedimento
Dureza	< 0.1 mmol/l

#### 4. Desagüe

Conecte las siguientes salidas directamente al embudo de drenaje o conéctelos a través de un tubo colector de drenaje. El sistema de drenaje debe soportar temperaturas entre los 80°C – 120°C.

**Tabla 2: Conexiones a servicios**

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Desfogue Vapor	30 PSIG, 80-120°C	Acople estriado para manguera de ½"
Drenaje Cámara	80°C	Válvula de bola de 3/8"

#### 5. Requerimientos Eléctricos

El suministro eléctrico debe estar acorde a la información suministrada en la Tabla 3.

**Tabla 3: Requerimientos Eléctricos**

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Electricidad	220 VAC, 60 Hz, Bifásico (Dos Fases), 2.5kW (no exceder fluctuaciones +10%)	220VAC: 2 Fases+ Tierra. NEMA L6-20P