

Marca: JPINGLOBAL

Modelo: 2019-2020

Referencia: JP23LH

Tipo: Esterilizador a vapor digital –automático

Descripción: Autoclave digital automática horizontal de sobremesa para sector salud clase S.

1. Condiciones ambientales

La atmósfera ambiente donde se encuentre la autoclave no debe exceder los 40 °C (104 °F), ni un 80% de humedad relativa.

No deben existir gases y vapores peligrosos en la atmosfera donde se encuentre la autoclave.


2. Montaje

Las dimensiones externas de la autoclave son las siguientes:

Ancho: 589 mm

Altura: 465 mm

Fondo: 738 mm

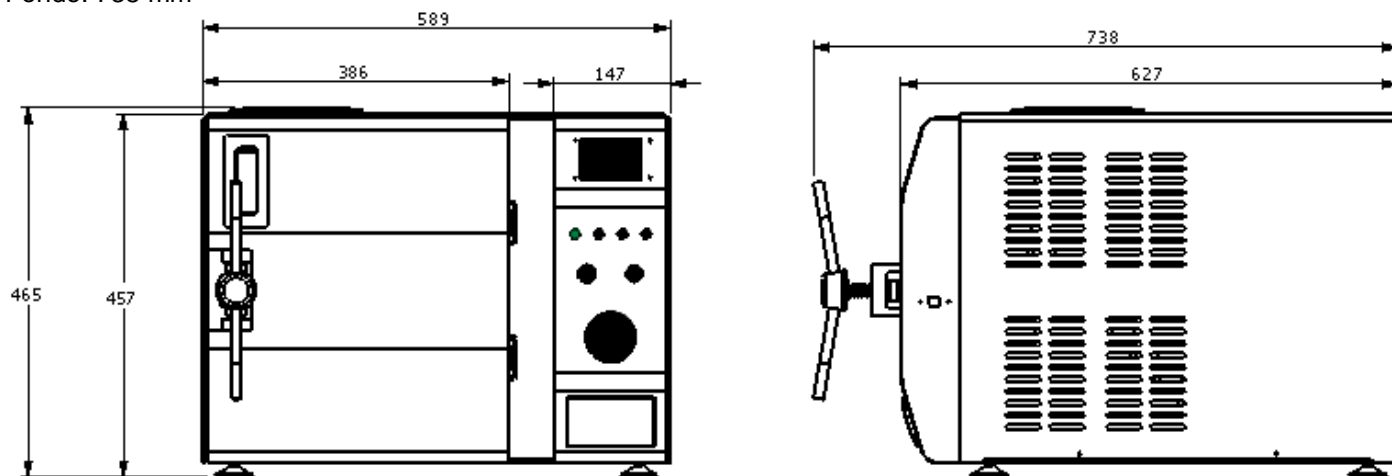

3. Agua

El agua que se aplique a la autoclave debe cumplir con las siguientes características:

Tabla 1: Características Físicas y niveles máximos aceptables de contaminantes en el agua*

Residuo por evaporación	≤15 mg/l
Sílice	≤2 mg/l
Hierro	≤0.2 mg/l
Cadmio	≤0.005 mg/l
Plomo	≤0.05 mg/l
Otros Metales Pesados	≤0.1 mg/l
Cloruro	≤3 mg/l
Fosfato	≤0.5 mg/l

Conductividad	$\leq 50 \text{ us/cm}, \geq 1 \text{ us/cm}$
pH	6.5 a 8
Apariencia	Incoloro, Limpio sin sedimento
Dureza	< 0.1 mmol/l

4. Desagüe

El sistema de drenaje debe soportar temperaturas entre los 80°C – 100°C*.

Tabla 2: Conexiones a servicios

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Drenaje Reservoirio	80°C	Válvula de bola Hembra

*El drenaje del reservorio se debe realizar para efectuar labores de limpieza en el mismo, se recomienda realizar esta limpieza por lo menos una vez por semana.

5. Requerimientos Eléctricos

El suministro eléctrico debe estar acorde a la información suministrada en la Tabla 3.

Tabla 3: Requerimientos Eléctricos

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Electricidad	220 VAC, 60 Hz, Bifásico (Dos Fases), 2kW (no exceder fluctuaciones +10%)	220VAC: 2 Fases+ Tierra. NEMA L6-20P