

Requerimientos De Instalación

1. Condiciones ambientales

La atmósfera ambiente donde se encuentre la autoclave no debe exceder los 40 °C (104 °F), ni un 80% de humedad relativa.


No deben existir gases y vapores peligrosos en la atmosfera donde se encuentre la autoclave.


2. Montaje


Coloque la autoclave en una superficie nivelada, dejando un espacio adecuado a su alrededor para la operación y servicio.

Las dimensiones externas de la autoclave son las siguientes:

Figura 1. Medidas en mm Autoclave 110L

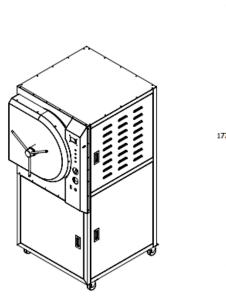

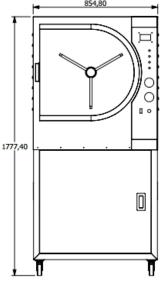

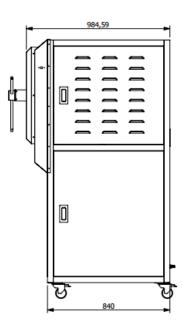

2.1. Utilidades

Conecte la autoclave a los suministros de la siguiente manera:

2.1.1. Agua

La autoclave debe contar con un sistema de suministro agua:

- 1. Agua destilada o libre de minerales para el generador de vapor.
 - Conecte el depósito de agua destilada o libre de minerales a una fuente de suministro de agua destilada o libre de minerales mediante un tubo de ½ ".
 - La presión debe estar en el rango de 2-5 bar (30-70 psi).
 - Dureza <0.1 mmol/l.
 - Conductividad <50uS/cm.

Tabla 1: Características Físicas y niveles máximos aceptables de contaminantes en el agua*

contaminantes en el agua		
Residuo por evaporación	≤15 mg/l	
Sílice	≤2 mg/l	
Hierro	≤0.2 mg/l	
Cadmio	≤0.005 mg/l	
Plomo	≤0.05 mg/l	
Otros Metales Pesados	≤0.1 mg/l	
Cloruro	≤3 mg/l	
Fosfato	≤0.5 mg/l	
Conductividad	≤50 us/cm	
рН	6.5 a 8	
Apariencia	Incoloro, Limpio sin sedimento	
Dureza	< 0.1 mmol/l	

2.1.2. Desagüe

Conecte las siguientes salidas directamente al embudo de drenaje o conéctelos a través de un tubo colector de drenaje de 4-6". El sistema de drenaje debe soportar temperaturas entre los $80^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$.

Tabla 2: Salidas de vapor y condensado de Autoclave

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Salida Vapor Cámara	30 PSIG, 105-134°C	Acople estriado para manguera de ½"
Salida Condensado Cámara	30 PSIG, 105-134°C	Acople estriado para manguera de ½"
Salida Condensado Pre- Cámara	30 PSIG, 105-134°C	Acople estriado para manguera de ½"
Drenaje Generador de Vapor	30 PSIG, 105-134°C	Acople estriado para manguera de ½"

2.2. Requerimientos Eléctricos

El suministro eléctrico debe estar acorde a la información suministrada en la Tabla 3.

Tabla 3: Requerimientos Eléctricos

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Electricidad	220 VAC, 60 Hz, Trifásico (Tres	220VAC: 3 Fases+ Tierra.
	Fases), 12kW (no exceder	
	fluctuaciones <u>+</u> 10%)	