

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDAD 160 LITROS – AUTOMÁTICA REF. JPA160LV

FJP – 63	
Version 01	
Pág. 1 de 2.	

JP BIOINGENIERÍA S.A.S. NIT. 900409216-6

Marca: JPINGLOBAL Modelo: 2021

Referencia: JPA160LV

Tipo: Esterilizador a vapor digital -automático

Descripción: Autoclave digital automática de gran capacidad (Cámara redonda) con sistema integrado de vapor y control electrónico.

1. Condiciones ambientales


La atmósfera ambiente donde se encuentre la autoclave no debe exceder los 40 °C (104 °F), ni un 80% de humedad relativa.

No deben existir gases y vapores peligrosos en la atmosfera donde se encuentre la autoclave.

2. Montaje

Coloque la autoclave en una superficie nivelada, dejando un espacio adecuado a su alrededor para la operación y servicio.

Las dimensiones del equipo se encuentran en mm.

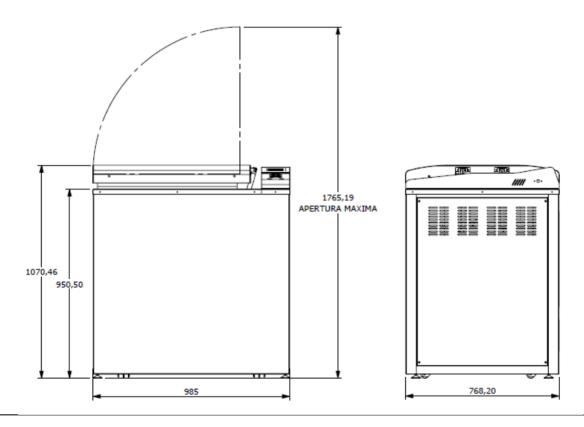

3. Utilidades

Conecte la autoclave a los suministros de la siguiente manera:

3.1. Agua

Agua destilada o libre de minerales para el generador de vapor.

- Conecte el depósito de agua destilada o libre de minerales a una fuente de suministro de agua destilada o libre de minerales mediante un tubo de ½ "
- La presión debe estar en el rango de 2-5 bar (30-70 psi)
- Dureza <0.1 mmol/l
- Conductividad <50uS/cm y >10uS/cm



REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN AUTOCLAVE VERTICAL CAPACIDAD 160 LITROS – AUTOMÁTICA REF. JPA160LV

FJP – 63
Version 01
Pág. 2 de 2.

Tabla 1: Características Físicas y niveles máximos aceptables de contaminantes en el agua*

Residuo por evaporación	≤15 mg/l	
Sílice	≤2 mg/l	
Hierro	≤0.2 mg/l	
Cadmio	≤0.005 mg/l	
Plomo	≤0.05 mg/l	
Otros Metales Pesados	≤0.1 mg/l	
Cloruro	≤3 mg/l	
Fosfato	≤0.5 mg/l	
Conductividad	≤50 us/cm, >10uS/cm	
рН	6.5 a 8	
Apariencia	Incoloro, Limpio sin sedimento	
Dureza	< 0.1 mmol/l	

4. Desagüe

Conecte las siguientes salidas directamente al embudo de drenaje o conéctelos a través de un tubo colector de drenaje de 4-6". El sistema de drenaje debe soportar temperaturas entre los 80°C – 100°C.

La conexión de salida de vapor del equipo es acople estriado para manguera de $\frac{1}{2}$ ". El equipo se envía con 2m de manguera de fábrica.

5. Requerimientos Eléctricos

El suministro eléctrico debe estar acorde a la información suministrada en la Tabla 2.

Tabla 2: Requerimientos Eléctricos

SERVICIO	REQUERIMIENTOS	CONEXIÓN
Electricidad	220 VAC, 60 Hz, Trifásico	220VAC: 3
	(Tres Fases), 10kW (no	Fases+ Tierra.
	exceder fluctuaciones ±10%)	